

Dynamic[®]

IMPLANTES
DENTALES



DYNAMIC ESSENTIAL

Longitudes

8 mm

10 mm

11,5 mm

13 mm

16 mm



Diámetros

3,3 / 3,75 / 4,2 / 5

La línea de implantes Dynamic nace de una combinación precisa entre ingeniería, diseño y visión clínica. Cada sistema ha sido desarrollado para ofrecer estabilidad confiable, comportamiento biomecánico equilibrado y una integración predecible, adaptándose a las distintas realidades quirúrgicas con seguridad y precisión. Dynamic representa una solución integral pensada para profesionales que buscan consistencia, versatilidad y resultados sostenibles en el tiempo, respaldados por un diseño inteligente y una fabricación orientada a la excelencia.

DYNAMIC PLUS HI

Longitudes

6,5 mm

8 mm

10 mm

11,5 mm

13 mm

16 mm



DYNAMIC PLUS GM

Longitudes

8 mm

10 mm

11,5 mm

13 mm

16 mm



DYNAMIC ESSENTIAL



- A** Plataforma única
- B** Microanillos en el cuello
- C** Espiras progresivas
- D** Descargas helicoidales
- E** Cuerpo cilíndrico
- F** Tratamiento de superficie: blastinado, doble grabado ácido, rugoso en toda su superficie
- G** Ápice twist, autorroscante

3,3 / 3,75 / 4,2 / 5



**Interface protética universal
para todos los diámetros**

Implante dental cilíndrico indicado para protocolos convencionales.

El implante Dynamic Essential es un modelo cilíndrico con conexión interna, desarrollado para ofrecer estabilidad primaria equilibrada, precisión protésica y comportamiento biomecánico predecible. Su diseño recto permite una inserción controlada y una distribución homogénea de las fuerzas, lo que favorece la estabilidad a largo plazo.

Es una solución versátil, ideal para protocolos convencionales y restauraciones altamente precisas.

Beneficios clínicos

- Ajuste implante-pilar preciso
- Alta estabilidad anti-rotacional
- Mejor distribución de fuerzas
- Seguridad mecánica a largo plazo

Dimensiones

Diámetro	Longitud	A	B	C	D
Ø 3.3	8 mm	Ø 3.7	Ø 2.55	Ø 1.55	Ø 3.5
	10 mm	Ø 3.7	Ø 2.55	Ø 1.55	Ø 3.5
	11.5 mm	Ø 3.7	Ø 2.55	Ø 1.55	Ø 3.5
	13 mm	Ø 3.7	Ø 2.55	Ø 1.55	Ø 3.5
	16 mm	Ø 3.7	Ø 2.55	Ø 1.55	Ø 3.5
Ø 3.75	8 mm	Ø 3.85	Ø 2.9	Ø 2	Ø 3.5
	10 mm	Ø 3.85	Ø 2.9	Ø 2	Ø 3.5
	11.5 mm	Ø 3.85	Ø 2.9	Ø 2	Ø 3.5
	13 mm	Ø 3.85	Ø 2.9	Ø 2	Ø 3.5
	16 mm	Ø 3.85	Ø 2.9	Ø 2	Ø 3.5
Ø 4.2	6.5 mm	Ø 4.2	Ø 3	Ø 2.1	Ø 3.85
	8 mm	Ø 4.2	Ø 3	Ø 2.1	Ø 3.85
	10 mm	Ø 4.2	Ø 3	Ø 2.1	Ø 3.85
	11.5 mm	Ø 4.2	Ø 3	Ø 2.1	Ø 3.85
	13 mm	Ø 4.2	Ø 3	Ø 2.1	Ø 3.85
	16 mm	Ø 4.95	Ø 3.3	Ø 2.6	Ø 3.85
Ø 5	6.5 mm	Ø 4.95	Ø 3.3	Ø 2.6	Ø 3.85
	8 mm	Ø 4.95	Ø 3.3	Ø 2.6	Ø 3.85
	10 mm	Ø 4.95	Ø 3.3	Ø 2.6	Ø 3.85
	11.5 mm	Ø 4.95	Ø 3.3	Ø 2.6	Ø 3.85
	13 mm	Ø 4.95	Ø 3.3	Ø 2.6	Ø 3.85
	16 mm	Ø 4.95	Ø 3.3	Ø 2.6	Ø 3.85

**DYNAMIC
ESSENTIAL**
**Conexión
interna
Cilíndrico
y suave**

Conexión interna

Ajuste implante-pilar preciso

Sistema anti-rotacional

Mayor estabilidad mecánica

Roscas optimizadas

Coronales: compresión controlada

Medias: estabilidad primaria

Apicales: autorroscantes

Ápice activo

Facilita la inserción

Tratamiento de superficie:
blastinado, doble grabado ácido

Favorece la oseointegración

Cuerpo cilíndrico

Inserción precisa y progresiva

Estabilidad primaria equilibrada

Anclaje seguro

Distribución biomecánica

Reduce el estrés óseo




dynamicargentina


www.dynamicimplantes.com.ar

ventas@dynamicimplantes.com.ar

DYNAMIC PLUS HI

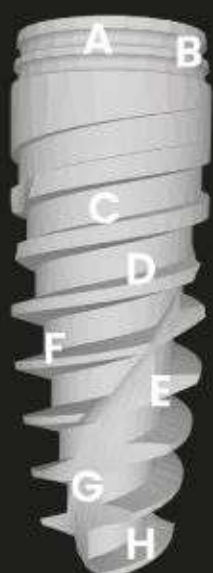

- A** Plataforma única en todos los diámetros
- B** Microanillos en el cuello
- C** Espiras variables
- D** Descargas helicoidales
- E** Autoperforante, autorroscante
- F** Núcleo cónico
- G** Tratamiento de superficie: **blastinado, doble grabado ácido,**
- H** Ápice plano

3,3 / 3,75 / 4,2 / 5



**Interface protética universal
para todos los diámetros**

El implante Dynamic Plus presenta un cuerpo de conicidad progresiva con espiras variables, diseñado para generar condensación ósea lateral durante la inserción. Esta geometría brinda una alta estabilidad inicial, lo que lo convierte en una opción confiable para protocolos de carga inmediata, especialmente en hueso blando.

El ápice posee un diseño que protege las estructuras anatómicas, combinado con espiras cortantes que facilitan la penetración ósea y un fresado angulado que mejora la precisión durante la colocación. En el cuello, los microanillos y la superficie rugosa optimizan el contacto hueso-implante, reduciendo la pérdida ósea crestal y mejorando la distribución de las cargas funcionales.

Dimensiones

Diámetro	Longitud	A	B	C	D
Ø 3.3	6.5 mm	Ø 3.7	Ø 2.55	Ø 1.55	Ø 3.5
	8 mm	Ø 3.7	Ø 2.55	Ø 1.55	Ø 3.5
	10 mm	Ø 3.7	Ø 2.55	Ø 1.55	Ø 3.5
	11.5 mm	Ø 3.7	Ø 2.55	Ø 1.55	Ø 3.5
	13 mm	Ø 3.7	Ø 2.55	Ø 1.55	Ø 3.5
	16 mm	Ø 3.7	Ø 2.55	Ø 1.55	Ø 3.5
Ø 3.75	6.5 mm	Ø 3.85	Ø 2.9	Ø 2	Ø 3.5
	8 mm	Ø 3.85	Ø 2.9	Ø 2	Ø 3.5
	10 mm	Ø 3.85	Ø 2.9	Ø 2	Ø 3.5
	11.5 mm	Ø 3.85	Ø 2.9	Ø 2	Ø 3.5
	13 mm	Ø 3.85	Ø 2.9	Ø 2	Ø 3.5
	16 mm	Ø 3.85	Ø 2.9	Ø 2	Ø 3.5
Ø 4.2	6.5 mm	Ø 4.2	Ø 3	Ø 2.1	Ø 3.5
	8 mm	Ø 4.2	Ø 3	Ø 2.1	Ø 3.5
	10 mm	Ø 4.2	Ø 3	Ø 2.1	Ø 3.5
	11.5 mm	Ø 4.2	Ø 3	Ø 2.1	Ø 3.5
	13 mm	Ø 4.2	Ø 3	Ø 2.1	Ø 3.5
	16 mm	Ø 4.2	Ø 3	Ø 2.1	Ø 3.5
Ø 5	6.5 mm	Ø 4.95	Ø 3.3	Ø 2.6	Ø 3.5
	8 mm	Ø 4.95	Ø 3.3	Ø 2.6	Ø 3.5
	10 mm	Ø 4.95	Ø 3.3	Ø 2.6	Ø 3.5
	11.5 mm	Ø 4.95	Ø 3.3	Ø 2.6	Ø 3.5
	13 mm	Ø 4.95	Ø 3.3	Ø 2.6	Ø 3.5
	16 mm	Ø 4.95	Ø 3.3	Ø 2.6	Ø 3.5

**DYNAMIC
PLUS HI**
**Hex. interno
Cónico
y agresivo**

Plataforma única
Compatible en todos los diámetros.

Microanillos

Más contacto óseo.

Roscas variables

Coronales: cuadradas y anchas.

Medias: cuadradas finas.

Apicales: en V, autoperforantes.

Ápice seguro

Protege estructuras.

Tratamiento de superficie:
**blastinado, doble grabado ácido,
rugoso en toda su superficie**

Blasteadada. Favorece la oseointegración.

Cuerpo cónico


 Alta estabilidad primaria. Inserción fácil
y precisa. Estabilidad superior.

[dynamicargentina](https://www.facebook.com/dynamicargentina)

www.dynamicimplantes.com.ar

ventas@dynamicimplantes.com.ar

DYNAMIC PLUS GM

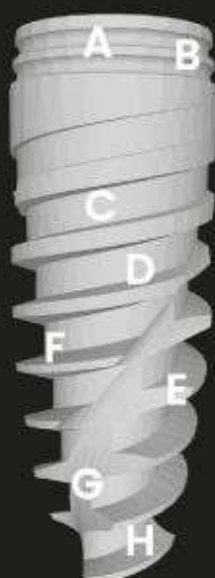

- A** Plataforma única en todos los diámetros
- B** Microanillos en el cuello
- C** Espiras variables
- D** Descargas helicoidales
- E** Autoperforante, autorroscante
- F** Núcleo cónico
- G** Tratamiento de superficie: **blastinado, doble grabado ácido,**
- H** Ápice plano

3,3 / 3,75 / 4,2 / 5



**Interface protética universal
para todos los diámetros**

El implante Dynamic Plus fue desarrollado para ofrecer máxima estabilidad primaria y un alto control durante la inserción. Su diseño autoperforante con cuerpo espiralado y rosca de paso variable permite redireccionar el implante durante la colocación, lo que logra una excelente adaptación incluso en casos clínicos complejos.

Aporta una alta condensación ósea y resulta especialmente indicado para rebordes angostos y situaciones que requieren seguridad desde el primer momento.

Estabilidad primaria superior
Redireccionamiento intraoperatorio
Alta adaptación al hueso
Expansión de rebordes angostos

Diámetro	Longitud	Dimensiones			
		A	B	C	D
Ø 3.3	8 mm	Ø 3.7	Ø 2.55	Ø 1.55	Ø 3
	10 mm	Ø 3.7	Ø 2.55	Ø 1.55	Ø 3
	11.5 mm	Ø 3.7	Ø 2.55	Ø 1.55	Ø 3
	13 mm	Ø 3.7	Ø 2.55	Ø 1.55	Ø 3
Ø 3.75	8 mm	Ø 3.85	Ø 2.9	Ø 2	Ø 3
	10 mm	Ø 3.85	Ø 2.9	Ø 2	Ø 3
	11.5 mm	Ø 3.85	Ø 2.9	Ø 2	Ø 3
	13 mm	Ø 3.85	Ø 2.9	Ø 2	Ø 3
Ø 4.2	8 mm	Ø 4.2	Ø 3	Ø 2.1	Ø 3
	10 mm	Ø 4.2	Ø 3	Ø 2.1	Ø 3
	11.5 mm	Ø 4.2	Ø 3	Ø 2.1	Ø 3
	13 mm	Ø 4.2	Ø 3	Ø 2.1	Ø 3
Ø 5	8 mm	Ø 4.95	Ø 3.3	Ø 2.6	Ø 3
	10 mm	Ø 4.95	Ø 3.3	Ø 2.6	Ø 3
	11.5 mm	Ø 4.95	Ø 3.3	Ø 2.6	Ø 3
	13 mm	Ø 4.95	Ø 3.3	Ø 2.6	Ø 3

**DYNAMIC
PLUS GM**

**Gran morse
Cónico
y agresivo**



Plataforma única
Compatible en todos los diámetros.

Microanillos

Más contacto óseo.

Roscas variables

Coronales: cuadradas y anchas.

Medias: cuadradas finas.

Apicales: en V, autoperforantes.

Ápice seguro

Protege estructuras.

Tratamiento de superficie:

**blastinado, doble grabado ácido,
rugoso en toda su superficie**

Blasteada y atacada con ácido.

Favorece la oseointegración.

Cuerpo cónico

Alta estabilidad primaria.

Inserción fácil y precisa.

Estabilidad superior.



[dynamicargentina](https://www.facebook.com/dynamicargentina)



www.dynamicimplantes.com.ar



ventas@dynamicimplantes.com.ar

Dimensiones

Diámetro	Longitud	A	B	C	D
Ø 3.3	6.5 mm	Ø 3.7	Ø 2.55	Ø 1.55	Ø 3.5
	8 mm	Ø 3.7	Ø 2.55	Ø 1.55	Ø 3.5
	10 mm	Ø 3.7	Ø 2.55	Ø 1.55	Ø 3.5
	11.5 mm	Ø 3.7	Ø 2.55	Ø 1.55	Ø 3.5
	13 mm	Ø 3.7	Ø 2.55	Ø 1.55	Ø 3.5
	16 mm	Ø 3.7	Ø 2.55	Ø 1.55	Ø 3.5
Ø 3.75	6.5 mm	Ø 3.85	Ø 2.9	Ø 2	Ø 3.5
	8 mm	Ø 3.85	Ø 2.9	Ø 2	Ø 3.5
	10 mm	Ø 3.85	Ø 2.9	Ø 2	Ø 3.5
	11.5 mm	Ø 3.85	Ø 2.9	Ø 2	Ø 3.5
	13 mm	Ø 3.85	Ø 2.9	Ø 2	Ø 3.5
	16 mm	Ø 3.85	Ø 2.9	Ø 2	Ø 3.5
Ø 4.2	6.5 mm	Ø 4.2	Ø 3	Ø 2.1	Ø 3.5
	8 mm	Ø 4.2	Ø 3	Ø 2.1	Ø 3.5
	10 mm	Ø 4.2	Ø 3	Ø 2.1	Ø 3.5
	11.5 mm	Ø 4.2	Ø 3	Ø 2.1	Ø 3.5
	13 mm	Ø 4.2	Ø 3	Ø 2.1	Ø 3.5
	16 mm	Ø 4.2	Ø 3	Ø 2.1	Ø 3.5
Ø 5	6.5 mm	Ø 4.95	Ø 3.3	Ø 2.6	Ø 3.5
	8 mm	Ø 4.95	Ø 3.3	Ø 2.6	Ø 3.5
	10 mm	Ø 4.95	Ø 3.3	Ø 2.6	Ø 3.5
	11.5 mm	Ø 4.95	Ø 3.3	Ø 2.6	Ø 3.5
	13 mm	Ø 4.95	Ø 3.3	Ø 2.6	Ø 3.5
	16 mm	Ø 4.95	Ø 3.3	Ø 2.6	Ø 3.5

**DYNAMIC
PLUS HI**

**Hex. interno
Cónico
y agresivo**



Plataforma única
Compatible en todos los diámetros.

Microanillos

Más contacto óseo.

Roscas variables

Coronales: cuadradas y anchas.

Medias: cuadradas finas.

Apicales: en V, autoperforantes.

Ápice seguro

Protege estructuras.

Tratamiento de superficie:

**blastinado, doble grabado ácido,
rugoso en toda su superficie**

Blasteada. Favorece la oseointegración.

Cuerpo cónico

Alta estabilidad primaria. Inserción fácil
y precisa. Estabilidad superior.



[dynamicargentina](https://www.dynamicargentina.com)



www.dynamicimplantes.com.ar



ventas@dynamicimplantes.com.ar

Dynamic[®]

IMPLANTES DENTALES

Avalados por ANMAT

PROTOCOLO DE FRESADO

Evolución cónica

	Ø 3.5	Ø 3.75	Ø 4.0	Ø 4.5
Lanza cónica				
Fresa helicoidal Ø 2.2				
Fresa cónica Ev. Ø 3.5				
Fresa cónica Ev. Ø 3.5				
Avellanador Ø 3.5				
Fresa cónica Ev. Ø 3.75				
Fresa cónica Ev. Ø 3.75				
Avellanador Ø 3.75				
Fresa cónica Ev. Ø 4.0				
Fresa cónica Ev. Ø 4.0				
Avellanador Ø 4.0				
Fresa cónica Ev. Ø 4.5				
Fresa cónica Ev. Ø 4.5				
Avellanador Ø 4.5				



Fresar 2 mm (+) del largo del implante elegido



Opcional en Huesos duros (I/II)



Fresar solo 3 mm



Dynamic[®]

**IMPLANTES
DENTALES**

